

POWER SERIES

TDX[®] SP2 NB Modulite



Cadeira de rodas elétrica de tração central, ágil e compacta
com assento Modulite altamente adaptável e confortável



| TDX® SP2 NB Modulite

Movimento com facilidade.

A TDX® SP2 NB (Narrow Base) é a nossa cadeira de rodas elétrica compacta e versátil de tração central. Navegue em espaços apertados com facilidade, levando-o onde quiser, numa vasta gama de ambientes.

Descontraia com a confiança que uma condução fiável e de elevado desempenho oferecem.



| TDX® SP2 NB Modulite

Começa com uma base compacta.

A TDX® SP2 NB (Narrow Base) foi concebida para navegar nos espaços mais apertados com um desempenho de condução consistente e suave.



Nova gama de carenagens

Escolha entre uma seleção de novas e entusiasmantes carenagens coloridas, para um visual elegante.



Largura compacta de **610 mm**



Raio de viragem ágil de **560 mm**



Excelente manobrabilidade

A base de tração central é fácil de conduzir em espaços apertados, no interior e no exterior.



Suspensão SureStep® patenteada

Proporciona uma condução suave e confortável, enfrentando superfícies difíceis, sem esforço.



Maior estabilidade e segurança

Concebida para garantir que as seis rodas permanecem firmes no chão com a função de Stability Lock.

| TDX® SP2 NB Modulite

Novas cores. Durabilidade extra.

Dê um toque de frescura e estilo com uma nova cor de carenagem. A durabilidade extra da mesma, ajuda-o a proteger e a suportar os desafios do dia a dia.



Preto Obsidiano

Vermelho Rubi

Púrpura

Azul

Azul Ártico

| TDX® SP2 NB Modulite

Vastas opções de posicionamento.

A nossa versátil unidade de assento Modulite proporciona uma posição personalizada para maior conforto e suporte.

Desde os requisitos de assento mais básicos até às necessidades posturais mais complexas, o design modular maximiza as possibilidades de posicionamento.



Soluções completas

Vasta gama de opções de posicionamento sentado, incluindo encostos, almofadas de assento, apoios de braços, apoios de cabeça e muitos outros.



Confortável e segura

A basculação de 50° e a elevação do assento de 300 mm com inclinação de 45°, promovem maior alívio de pressão.



Apoios de pernas central elétrico LNX

Ajustam-se tanto em ângulo como em comprimento, funcionando com a reclinção elétrica para ajudar a reduzir as forças de cisalhamento.



Soluções premiadas Matrix®

Opções de assentos Matrix personalizados para garantir sempre um ótimo ajuste.

Várias de opções de basculação

para alívio de pressão e maximizar o conforto.



300 mm de elevação do assento combinados com uma basculação até **45°**

| TDX® SP2 NB Modulite

Assento Modulite. Ajustabilidade modular.

A nossa solução de assentos mais popular foi concebida a pensar em si. Com uma abordagem modular, a unidade de assento Modulite é facilmente adaptada para se ajustar perfeitamente e proporcionar um conforto e suporte excecionais.

Dados Técnicos

Largura do assento: 330 - 580 mm

Profundidade do assento: 410 - 560 mm

Altura do assento: a partir de 450 mm

Altura do apoio de braços: 230 - 390 mm

Comprimento do apoio de pés: 280 - 460 mm



Assento
ajustável para
um encaixe
perfeito



| TDX® SP2 NB Modulite

Com tecnologia avançada **LiNX**®

A tecnologia **LiNX**® ajuda a proporcionar uma experiência de condução personalizada e confiável. A tecnologia inovadora aprende os hábitos e as preferências ao longo do tempo, tornando-a num sistema super intuitivo.



| TDX® SP2 NB Modulite

Descubra mais.



Novo suporte de comando Resolve

- Gama excecional de posições de comando para um conforto otimizado.
- Ajustável em tensão.
- Conforto e controlo otimizados.



Ecrã tátil de 3.5"

Impressionante ecrã tátil a cores de 3,5" com joystick, velocímetro e conta-quilómetros.



Comandos especiais

Incluindo comandos compactos, de cabeça e com sensores de proximidade.



Bluetooth® incorporado

Permite a conectividade com dispositivos e comandos externos.



Opções de input

Uma grande variedade de opções input de comandos, permite uma configuração personalizada para um controlo máximo e a garantia de que a cadeira elétrica reagirá de forma consistente.



| TDX® SP2 NB Modulite

Dados técnicos.

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual do utilizador, visite o nosso sítio www.invacare.pt.

Novas cores



Preto Obsidiano

Vermelho Rubi

Púrpura

Azul

Azul ártico



Largura do assento



Profundidade do assento



Altura do assento



Altura do encosto



Altura do apoio de braços



Apoios de pés



Ângulo do assento

Placa de assento Modulite única

430 - 480 mm	410 - 510 mm	450 - 475 mm	480/540 mm	275 - 390 mm	290 - 460 mm	0° - 8°
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	---------

Assento telescópico Modulite

330 - 530 mm	410 - 560 mm	450 - 475 mm	480/540/ 560 - 610 mm	230 - 365 mm	280 - 460 mm	0° - 50°
--------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------	----------



Ângulo do encosto




Altura total



Comprimento total incluindo apoios de pés



Comprimento total sem apoios de pés

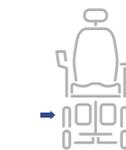

Largura da base de tração



Peso máximo do utilizador



Capacidade da bateria

Placa de assento Modulite única

90° - 120°	1010 mm	1160 mm	980 mm	610 mm	150 kg	50 Ah
------------	---------	---------	--------	--------	--------	-------

Assento telescópico Modulite

90° - 120°	1010 - 1170 mm	1160 mm	980 mm	610 mm	150 kg	50 Ah
------------	----------------	---------	--------	--------	--------	-------



Diâmetro de viragem



Altura máxima de obstáculos transponíveis



Máxima inclinação



Velocidade



Autonomia



Peso total

Placa de assento Modulite única

1120 mm	75 mm	9° / 16%	até 10 km/h	até 26 km	138 kg
---------	-------	----------	-------------	-----------	--------

Assento telescópico Modulite

1120 mm	75 mm	9° / 16%	até 10 km/h	até 26 km	164 kg
---------	-------	----------	-------------	-----------	--------

| TDX® SP2 NB Modulite

Partilhe as suas ideias e ajude a moldar o futuro das cadeiras elétricas.

Convidamo-lo/a a **partilhar a sua opinião**. As suas perspetivas ajudar-nos-ão a servir melhor os utilizadores de cadeiras elétricas.

Digitalize e preencha o formulário.



Obrigado por nos deixar participar na sua viagem.

Equipa Invacare Power Series





Partilhe a sua opinião

SUBSCRIBE



 A minha cadeira permite-me viver uma vida independente e sair à rua todos os dias.

Ian Mackay
Embaixador da Invacare

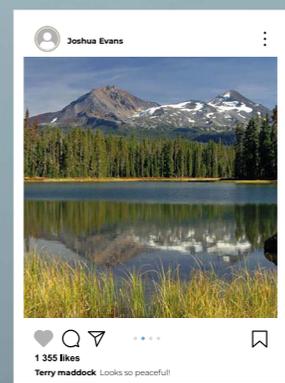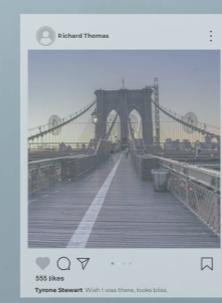

POWER SERIES

TDX SP2

AVIVA RX

AVIVA FX

Esprit Action

Kompas

Storm 4

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

©2024 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados.
Todas as informações citadas são consideradas corretas no
momento da impressão. A Invacare reserva-se o direito de alterar
as especificações do produto sem consulta prévia. PT - TDX SP2
NB Modulte - 11/2024.

