

Birdie[®]EVO



Design otimizado para transferências seguras

SLOW'R[®] | SMARTLOCK[®] | GANCHOS COM NOVO DESIGN

INVACARE
Yes, you can.[®]

A evolução dos elevadores de transferência

A nossa nova família **Birdie^{Evo}** foi desenvolvida para oferecer várias opções, que conjugadas com novas tecnologias, proporcionam o máximo de conforto e segurança quando elevar ou transferir o utilizador de ou para a cama, cadeira ou até mesmo chão.

Baseada no reconhecido **Birdie**, a nova gama focada na visão do utilizador, engloba tudo o que era anteriormente valorizado no Birdie, enquanto traz novas características para melhorar a experiência do utilizador e do cuidador.

Abrangência em altura

O **Birdie^{Evo}** permite uma elevação ergonómica muito abrangente que possibilita que o utilizador seja mais facilmente rodado a 360° e transferido para a superfície de apoio. Facilita a tarefa do cuidador e tranquiliza o utilizador.

Espaço otimizado

O braço comprido e de amplitude elevada, assegura maior espaço para o utilizador, mesmo na posição mais alta. O espaço amplo em frente ao atuador reduz o contacto dos membros inferiores do utilizador com o elevador.



Fácil de usar, transportar e arrumar

A nossa nova família **Birdie^{Evo}** pode ser facilmente encartada e desencartada sem a necessidade de usar ferramentas. Os elevadores ocupam o mínimo de espaço quando arrumados e são fáceis de empurrar e transportar.

O **Birdie^{Evo Compact}** pesa apenas 31kg tornando-o ainda mais fácil de transportar e arrumar.



NOVO

OPÇÕES E CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS



Slow'R®

- ▶ Amortecedor integrado suaviza as descidas e minimiza o movimento de balanço. (opção)



SMARTLOCK®

- ▶ Sendo seguro e rígido, para além de estabilizar melhor o utilizador, este novo sistema de fixação é muito fiável. Possibilita a troca da barra com toda a segurança e rapidamente. (opção)



Design dos ganchos inovador

- ▶ Consegue-se montar a cesta na barra com uma só mão!
As fivelas da cesta ficam devidamente presas, oferecendo máxima segurança.

Outras características NOVAS



- ▶ Os punhos ergonómicos facilitam a condução e as manobras.



- ▶ O design curvilíneo do braço e da barra da cesta permite manter o contacto visual do cuidador com o utilizador durante todo o processo de transferência.



- ▶ O design ergonómico e curvo das pernas, permite chegar mais perto de poltronas ou cadeiras de rodas mais largas assim como oferece uma sensação de maior aconchego.





3 inovações chave

Do braço à barra de fixação da cesta

◀ **Slow'R®** **PATENTEADO** **Reduz o movimento de balanço**

Foi desenvolvido e integrado no braço um amortecedor para estabilizar o utilizador, oferecendo uma experiência mais tranquila e confortável para o utilizador. Permitindo ainda que o cuidador controle melhor o posicionamento do utilizador durante todo o processo de transferência. (Opcional)



◀ **SMARTLOCK®** **PATENTEADO** **Fixação da barra da cesta simples e segura**

O novo mecanismo de colocação e extração rápida possibilita a troca da barra de uma forma simples e segura, sem ferramentas. Um sistema de encaixe extremamente fiável assegura que ambas as partes da fixação fiquem bloqueadas uma na outra, aumentando ainda a estabilidade da barra. (Opcional)



◀ **Ganchos inovadores** **para colocação da cesta**

O novo design ergonómico do gancho permite que a fivela da cesta seja colocada com apenas uma mão. O gancho largo facilita a colocação das fivelas da cesta. O formato do gancho minuciosamente estudado, garante que as fivelas fiquem muito bem presas sem riscos de se soltarem da barra.

Apresentamos a família **Birdie^{EVO}**

A gama de elevadores desenvolvida sempre a pensar nos utilizadores e nos cuidadores.



Birdie^{EVO}

▲ **O novo padrão dos elevadores**

Versão melhorada do líder de mercado Birdie, desenvolvida para possibilitar transferências seguras, tanto em ambientes institucionais como domiciliários. Dobrável e com abertura de pernas manual. Disponível com barra de 4 pontos. Fornecido com cesta standard.



Birdie^{EVO COMPACT}

▲ **Ocupa pouco espaço para facilitar as manobras**

O tamanho reduzido do Birdie^{EVO Compact} permite executar manobras de forma fácil em espaços reduzidos. Dobrável e com abertura de pernas manual. Disponível com barra de cesta de 2 pontos ou 4 pontos. Fornecido com cesta standard.



Birdie^{EVO} Versão premium

▲ **Características superiores para funcionalidade melhorada**

Os nossos modelos premium são dobráveis e incluem de série as características exclusivas Slow'R e SMARTLOCK. Estão disponíveis com ou sem abertura das pernas elétrica, com barra de cesta de 4 pontos. Fornecidos com cesta standard.

Reg. em altura	▶ 415 - 1660 mm	▶ 530 - 1590 mm	▶ 415 - 1660 mm
Peso max. utilizador	▶ 180 kg	▶ 150 kg	▶ 180 kg
Raio de viragem	▶ 1400 mm	▶ 1070 mm	▶ 1400 mm


Opções e acessórios:

- ▶ Abertura das pernas elétrica ou manual
- ▶ Descida de emergência
- ▶ Barras de colocação da cesta com 2 ou 4 pontos em vários tamanhos
- ▶ Alavanca para abertura das pernas
- ▶ Balança para controlo de peso
- ▶ Vasta gama de cestas disponíveis em vários modelos, tecidos e tamanhos.



Dados técnicos ▼

Para mais informações sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o nosso website em www.invacare.pt

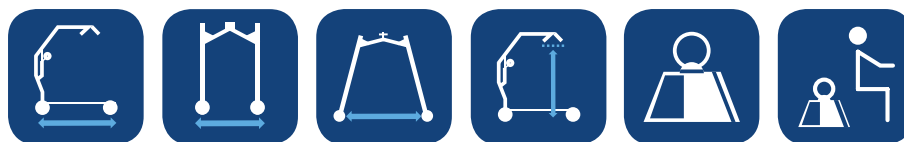

	Comprimento da base ▼	Largura da base ▼	Largura interior (pernas abertas) ▼	Regulação em altura ▼	Peso total ▼	Peso máximo de utilizador ▼
Birdie EVO	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie EVO COMPACT	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg
Birdie EVO PREMIUM	1235 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	41 kg	180 kg



	Altura da base ▼	Distância do chão ▼	Altura quando encartado ▼	Raio de viragem ▼	*Capacidade da bateria ▼
Birdie EVO	115 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 ciclos
Birdie EVO COMPACT	115 mm	35 mm	455 mm	1070 mm	40 ciclos
Birdie EVO PREMIUM	115 mm	35 mm	470 mm	1400 mm	40 ciclos

Todas as medidas são tiradas com rodízios de 100 mm e barra de suporte de 2 pontos.

*Com a bateria entre os 100% e 50%

Cor do chassis ▼



Cinza claro:
mastros, braço e barra de colocação da cesta
RAL: 7035



Cinza antracite:
base (pernas) e pega
RAL: 7016

Atenção: as cores podem variar ligeiramente das cores acima apresentadas

Informação regulamentar ▼



Tlf.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®