



CATÁLOGO VICAIR



www.invacare.pt



Yes, you can.

Índice

ALMOFADAS

Adjuster O2	7
Active O2	8
Vector O2	9
XXTRA O2	10
Centre Relief O2	11
Junior Vector O2	12
Vicair 4	13
Vicair Hygiene	14
Liberty & Liberty Profile	15
Liberty TC	16
AllRounder O2	17

ENCOSTOS

Liberty	18
Anatomic	19
Multifunction	20
Options Multifunction	21
Flex	22

ACESSÓRIOS

Apoio para calcanhar	23
----------------------	----



Tecnologia Vicair®

A melhor forma de redistribuição da pressão é o ar, no entanto, existem algumas desvantagens como por exemplo a falta de estabilidade e a tendência a perder ar. A Vicair resolveu estes problemas criando as Vicair SmartCells.



Esta tecnologia exclusiva Vicair, que utiliza as SmartCells, foi desenvolvida em cooperação com o Centro de Reabilitação de Amesterdão, ganhando o prémio no "Salon des Inventions" em Genebra. A Vicair desenvolve e produz a sua linha de produtos nos Países Baixos, para clientes em todo o mundo.



> **Uma almofada Vicair está sempre pronta a ser utilizada. Fiável, porque não esvazia. Duradoura e de manutenção fácil.**

UMA COMBINAÇÃO ÚNICA: PROTEÇÃO DA PELE E POSICIONAMENTO

Quando se senta numa almofada Vicair, é sustentado por centenas de SmartCells. As SmartCells dentro dos compartimentos da almofada movem-se com tão pouca fricção que o seu comportamento se assemelha ao de um fluido viscoso que se ajusta lentamente à forma do seu corpo.

Por outro lado, as SmartCells são suficientemente flexíveis para se moldarem individualmente, adaptando-se aos contornos do seu corpo.

O resultado é uma melhor redistribuição da pressão. Além disso, a forma tetraédrica das SmartCells e o design dos compartimentos tornam a almofada extremamente estável e evitam que o utilizador deslize para a frente. A almofada reduz assim as forças de cisalhamento ao mínimo e ajuda a manter uma ótima postura funcional.

FÁCIL DE UTILIZAR

As almofadas Vicair são muito fáceis de utilizar. Graças ao preenchimento perfeitamente equilibrado dos compartimentos, e podem ser utilizadas conforme são entregues. Se pretender ajustar a sua almofada para personalizar o seu posicionamento, basta deslocar as SmartCells de um compartimento para outro, até atingir a postura desejada. A almofada praticamente não necessita de manutenção: uma vez ajustada às especificações do utilizador, não precisa de uma bomba de ar, nem de um controlo diário.

As almofadas Vicair não são só extremamente confortáveis, como também incrivelmente leves: com uma média de peso inferior a 0,8 kg, o que as torna de longe as almofadas de alto desempenho mais leves do mercado.



As vantagens do ar, com estabilidade acrescida.

VICAIR é um produto fiável e de elevado desempenho, comercializado com sucesso ao longo de 25 anos, em 30 países do mundo.

- **UMA COMBINAÇÃO ENTRE POSICIONAMENTO DE QUALIDADE E PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO.**
- **PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO** excelente redistribuição da pressão
- **POSICIONAMENTO: AJUSTE FÁCIL E ADEQUADO TAMBÉM PARA CASOS COMPLEXOS** com almofadas e encostos que se adaptam facilmente aos contornos do corpo, encontrando a sua posição natural através da imersão. A posição pode ser ajustada, se necessário, modificando o preenchimento dos diferentes compartimentos.
- **SISTEMA EVOLUTIVO**
O posicionamento pode ser ajustado gradualmente ao longo do tempo.
- **ADAPTA-SE CONSTANTEMENTE AO CORPO EM MOVIMENTO** devido ao movimento entre as SmartCells.
- **ADEQUADAS PARA UTILIZADORES COM OU SEM ASSIMETRIAS POSTURAIAS, MESMO CONSIDERANDO CASOS EXTREMOS.**
- **EXCELENTE ESTABILIDADE**
impede-o de deslizar para a frente e proporciona-lhe um excelente suporte.
- **MELHORIA DA MOBILIDADE FUNCIONAL**
graças à maior estabilidade pélvica.
- **FIABILIDADE**
não rebenta, nem esvazia.
- **POUCA MANUTENÇÃO**
apenas necessário, como medida de precaução, verificar as Smartcells de 3 em 3 meses.
- **LEVE E RESISTENTE**
Não adiciona peso substancial à cadeira, sendo fácil de transportar.
- **CONFORTÁVEL**
Adapta-se à forma do corpo e absorve os impactos.
- **REGULAÇÃO DO MICROCLIMA**
Altamente resistente às alterações de temperatura
- **FÁCIL HIGIENIZAÇÃO**
As almofadas Vicair O2 são totalmente laváveis na máquina.

TIPOS DE CAPA DISPONÍVEIS

A capa influencia inevitavelmente o desempenho de uma almofada de assento. É por isso que as capas Vicair são fabricadas em materiais de qualidade que reforçam a eficácia da almofada, garantindo o máximo conforto e proteção. Cada tipo de capa tem as suas próprias características especiais.

CAPA COMFAIR

Esta capa respirável é concebida num material capaz de se expandir em todas as direcções, ajudando a reduzir a pressão sobre as proeminências ósseas. O design do tecido respirável permite a circulação do ar e a dissipação de calor.

CAPA INCOTEC/INCONTINENCE

Uma capa para incontinência está disponível em todas as almofadas de assento Vicair. Esta capa é feita de tecido elástico impermeável, prático em todas as situações (em instituições ou em casa) em que a incontinência e a higiene são uma dificuldade.

CAPA TOP - STANDARD

Especialmente concebida para a gama de almofadas O2, esta capa respirável cobre apenas a parte superior da almofada deixando aberta a parte inferior para uma melhor ventilação e conforto. É a cobertura ideal para gerir problemas de úlceras por pressão causadas devido a excesso de humidade.



Lavável na máquina

> Materiais sem látex



CAPA AIR EXCHANGE

Concebida para ser utilizada com as almofadas de assento Liberty Profile, é fabricada com um material extra respirável e confortável.



A evolução.

VICAIR® 02

As almofadas Vicair O2 minimizam os problemas de higiene causados pela incontinência.

A estrutura ventilada da almofada, com as SmartCells permite uma lavagem fácil em qualquer máquina de lavar sem retirar as SmartCells.

A almofada é ideal para utilizar em ambiente institucional ou domiciliário em casos de incontinência, ou quando a temperatura da pele e a humidade forem um problema para o utilizador.

A gama O2 cumpre todos os requisitos de tamanhos.

- Lavável à máquina a 60°C
- Respirável
- Leve, não se esvazia

Almofadas Vicair O2 são completamente laváveis na máquina a 60°C

- Após o procedimento de desinfeção utilizando detergentes domésticos ou profissionais.
- O uso de desinfetantes não é obrigatório.
- As almofadas devem ser lavadas com as SmartCells no seu lugar e com as capas exteriores removidas.

As almofadas Vicair O2 estão agora disponíveis com 3 tipos de capas:

TOP - STANDARD Capa respirável que cobre a parte superior da almofada

COMFAIR Capa respirável multielástica

INCONTINENCE Capa impermeável de alta qualidade

Qualquer pedido de uma capa adicional não incluída na encomenda original da almofada terá um custo adicional.

Devido à sua configuração, a Active O2 não necessita de uma capa externa. No entanto, pode ser encomendada como opção.

Lavável na máquina



Lavável a 60° em qualquer tipo de máquina. Não é necessário utilizar uma rede de lavagem nem retirar as SmartCells. Não secar na máquina.

Respirável



Almofadas totalmente ventiladas. A estrutura permeável protege contra os problemas de pele provocados pela humidade.

Resistente à Centrifugação



Suporta até 1200 rpm. Tempo de secagem de 5 horas.

145 tamanhos standard




A gama Vicair O2 está disponível em 145 tamanhos standard e 2 alturas. Muitos tamanhos personalizados são possíveis para satisfazer as necessidades de cada utilizador

Vicair Adjuster O2

A almofada ideal para utilizadores de cadeira de rodas com assimetria postural

> **A barreira pré-isquiática:** limita o deslizamento para a frente, convertendo as forças de cisalhamento em forças normais.

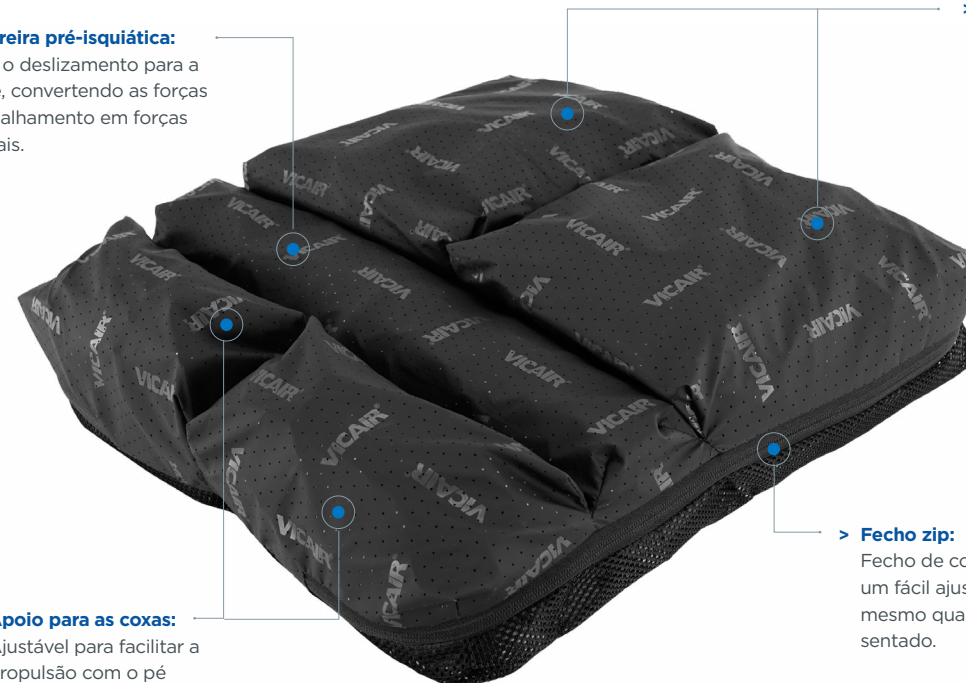

> **Imersão total:** Acompanha os contornos do corpo para uma distribuição equitativa da pressão/apoio das tuberosidades isquiáticas, mesmo em casos de assimetria pélvica.

> **Fecho zip:** Fecho de correr a meia altura para um fácil ajuste do posicionamento mesmo quando o utilizador está sentado.

A Vicair Adjuster O2 é composta por 5 compartimentos individuais, concebidos para se moldarem à carga. Cada compartimento foi concebido para influenciar uma zona específica da pélvis, alcançando um equilíbrio único entre a preservação da pele e dos tecidos subjacentes no ísquio, no cóccix e nos trocânteres, com o posicionamento da pélvis e apoio do fémur. Para necessidades específicas, o preenchimento de cada um dos 5 compartimentos pode ser facilmente ajustado. Permite-lhe alterar a densidade de cada compartimento, beneficiando os utilizadores que:

- Necessitam de acomodar uma assimetria pélvica
- Necessitem de acomodar uma obliquidade pélvica fixa ligeira ou grave ou correção de uma obliquidade pélvica flexível;
- Beneficiam de um apoio adicional das coxas, por exemplo, utilizadores com uma amputação acima do joelho.

PERFORMANCE DO PRODUTO

Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●●
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●●
Controlo do microclima	●●●●●
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●●
Estabilidade lateral	●●●●○
Estabilidade frontal	●●●●●
Prevenção de deslizamento	●●●●●
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●○
Manutenção e segurança	●●●●●
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●●
Nível de higiene	●●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●●●
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●●●
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	6 e 10 cm
Peso médio	534 g - 769 g
Peso máximo do utilizador	250 kg
Lavável na máquina	60°C

TAMANHOS DA ALMOFADA

- Tamanhos STANDARD > 53 cm apenas versão de 10 cm
- Sob consulta

Profundidade	Largura										
	35	38	40	43	45	48	50	53	55	58	60
35	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
38	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
43	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
45	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
53	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
58	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
60	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

* Todas as almofadas Vicair O2, exceto a Active O2 e a AllRounder O2, que não foram incluídas no teste.

Vicair Active O2

Para utilizadores ativos



Vicair Vector O2

A almofada mais estável para utilizadores de cadeiras de rodas



A Vicair Active O2 é uma almofada que consiste em 4 compartimentos individuais com Smartcells na parte de trás da almofada e uma espuma de contorno anatómico na parte da frente.

Atingindo um equilíbrio único entre a preservação da pele em áreas de alto risco como as TI, através da redistribuição da pressão, a estabilização da pélvis e maior facilidade nas transferências. Para necessidades específicas, o enchimento de cada um dos 4 compartimentos de SmartCells pode ser facilmente ajustado.

Permite alterar a densidade de cada compartimento, beneficiando utilizadores que:

- Necessitam de correção ou acomodação de uma pélvis assimétrica
- Desejam uma descarga (parcial) da região isquiática e do cóccix.
- Beneficiam de um apoio lateral adicional.

PERFORMANCE DO PRODUTO

Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●●
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●●
Controlo do microclima	●●●●●
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●●
Estabilidade lateral	●●●●●
Estabilidade frontal	●●●●●
Prevenção de deslizamento	●●●●●
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●●
Manutenção e segurança	●●●●●
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●●
Nível de higiene	●●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●●●
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●○
Tamanhos disponíveis	●●●●●
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	6 e 9 cm
Peso médio	700 g
Peso máximo do utilizador	200 kg
Lavável na máquina*	60°C
Capa	como opção

*exceto a parte de espuma

TAMANHOS DA ALMOFADA

- Tamanhos STANDARD > 53 cm apenas versão de 9 cm
- Sob consulta

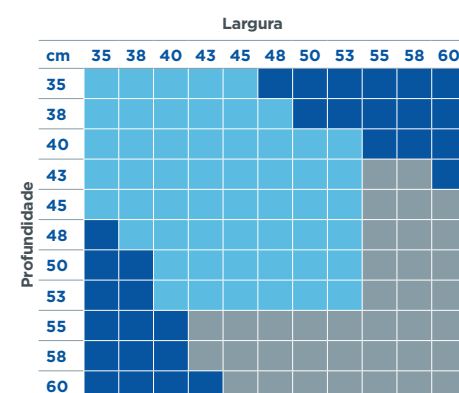

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

A Vicair Vector O2 é uma almofada com contorno, dividida em 9 compartimentos individuais. Cada compartimento é concebido para influenciar uma zona específica da pélvis, alcançando um equilíbrio único entre a preservação da pele nas TI, redistribuindo a pressão, estabilizando a pélvis e o posicionando dos fémures. Para necessidades específicas, o enchimento de cada um dos 9 compartimentos pode ser facilmente ajustado. Permite alterar a densidade de cada compartimento, beneficiando os utilizadores que:

- Necessitam de correção ou acomodação
- Necessitam de correção ou acomodação de uma pélvis assimétrica. (parcial) da zona isquiática e do cóccix.
- Necessitem de correção ou acomodação para um melhor alinhamento das coxas. (por exemplo, abdução, propulsão unilateral com o pé, abertura do ângulo pélvico).

PERFORMANCE DO PRODUTO


Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●●
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●○
Controlo do microclima	●●●●●
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●●
Estabilidade lateral	●●●●●
Estabilidade frontal	●●●●●
Prevenção de deslizamento	●●●●●
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●○
Manutenção e segurança	●●●●●
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●●
Nível de higiene	●●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●●●
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●●●
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	6 e 10 cm
Peso médio	500 g - 850 g
Peso máximo do utilizador	250 kg
Lavável na máquina	60°C

TAMANHOS DA ALMOFADA

- Tamanhos STANDARD > 53 cm apenas versão de 10 cm
- Sob consulta

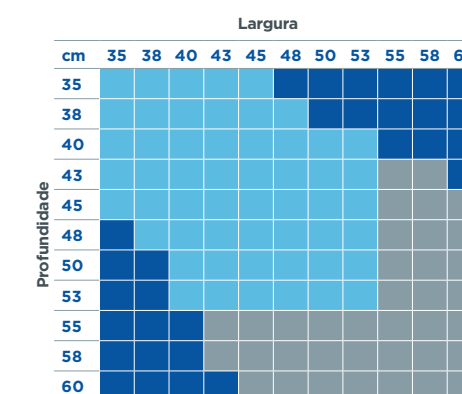

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

Vicair Xxtra O2

Para utilizadores bariátricos

> **Barreira pré-isquiática:**

limita o deslizamento frontal, diminuindo as forças de cisalhamento.

> **Imersão total:**

Acompanha o contorno do corpo para uma distribuição equitativa da pressão na região pélvica

> **Apoio para as coxas :**

Ajustável para facilitar a propulsão com o pé.

> **Fecho ZIP:**

À volta da almofada permite aceder a todos os compartimentos para ajustar o posicionamento.



Vicair Centre Relief O2

Possibilidade de descarga total numa zona de alto risco

> **Descarga da região Sacrococcígea**

com ajuste individual

> **Barreira pré-isquiática**

limita o deslizamento frontal

> **Apoio para as coxas :**

Ajustável para facilitar a propulsão com o pé



A Vicair XXtra é uma almofada especialmente desenvolvida para pessoas opulentas que desejam manter uma certa mobilidade. Tem todas as características da Adjuster.

Peso do utilizador até 500 kg. Tamanhos superiores aos produtos Vicair. Possibilidade de fabrico à medida.

- Adequado para pessoas opulentas
- Redistribuição da pressão
- Imersão e estabilidade para reduzir as forças de cisalhamento
- Posicionamento personalizado e um elevado nível de conforto
- Leve
- Adequada para pacientes com assimetrias.

PERFORMANCE DO PRODUTO


Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●●
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●●
Controlo do microclima	●●●●●
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●●
Estabilidade lateral	●●●●○
Estabilidade frontal	●●●●●
Prevenção de deslizamento	●●●●●
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●○
Manutenção e segurança	●●●●●
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●●
Nível de higiene	●●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●●●
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●●●
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	10 cm
Peso médio	900 g
Peso máximo do utilizador	500 kg
Lavável na máquina	60°C

TAMANHOS DA ALMOFADA

STANDARD	■
Sob Consulta	■

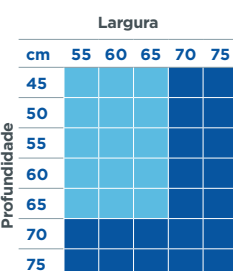

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

A Centre Relief O2 é a almofada ideal para criar um alívio total da região perineal. Simplesmente removendo as SmartCells da zona circular, pode criar uma zona sem contacto.

A imersão na almofada proporciona-lhe uma grande estabilidade, redistribuindo os seus movimentos e permitindo-lhe sentar-se com todo o conforto mesmo em situações dolorosas.

- Alívio total para a região Sacrococcígea
- Posicionamento estável

PERFORMANCE DO PRODUTO


Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●○
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●○
Controlo do microclima	●●●●○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●○
Estabilidade lateral	●●●●○
Estabilidade frontal	●●●●○
Prevenção de deslizamento	●●●●○
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●○
Manutenção e segurança	●●●●○
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●○
Nível de higiene	●●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●●○
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●●○
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	10 cm
Peso médio	750 g
Peso máximo do utilizador	250 kg

TAMANHOS DA ALMOFADA

STANDARD	■
Sob consulta	■

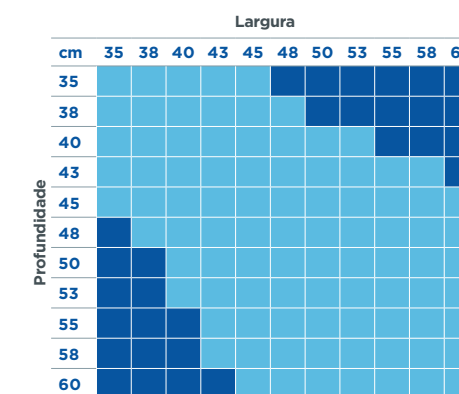

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

Vicair Junior Vector O2

Máxima estabilidade e conforto para as crianças

> **Apoio para os trocânteres e coxas:**
Compartimentos elevados e mais sólidos para um melhor posicionamento e uma melhor estabilidade lateral.



> **Cavidade Pélvica:**
Reduz a pressão

> **Alinhamento das pernas**

A almofada Vicair Junior Vector O2, com as suas SmartCells, foi especialmente concebida para as crianças. Adapta-se aos contornos anatómicos, proporcionando estabilidade e melhor mobilidade do tronco.

- Ótima estabilidade
- Confortável
- Leve e robusta
- Design especial para crianças
- SmartCells para uma ótima redistribuição da pressão

PERFORMANCE DO PRODUTO

Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●○
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●○
Controlo do microclima	●●●●○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●●
Estabilidade lateral	●●●●●
Estabilidade frontal	●●●●●
Prevenção de deslizamento	●●●●●
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●○
Manutenção e segurança	●●●●●
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●○
Nível de higiene	●●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●●●
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●●●
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	6 cm
Peso médio	350 g
Peso máx. do utilizador	100 kg

TAMANHOS DA ALMOFADA

■ STANDARD
■ Sob Consulta

Profundidade	Largura					
	cm	25	28	30	33	35
25	■	■	■	■	■	■
28	■	■	■	■	■	■
30	■	■	■	■	■	■
33	■	■	■	■	■	■
35	■	■	■	■	■	■

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

Vicair 4

Pronta a utilizar, na prevenção de úlceras por pressão

A Vicair 4 é uma almofada com SmartCells de elevado desempenho para a prevenção de úlceras de pressão. É composta por quatro compartimentos idênticos, concebidos para acomodar perfeitamente os contornos do corpo. A sua configuração proporciona o equilíbrio perfeito entre conforto, proteção da pele e estabilidade pélvica. É muito leve e não necessita de qualquer ajuste.

Proteção da pele

> Excelente redistribuição da pressão graças ao efeito envolvente das SmartCells, que se adaptam à morfologia de cada utilizador, e reduzem a pressão. A sua estrutura totalmente ventilada regula eficazmente o microclima.



Conforto e fiabilidade

> A Vicair 4 oferece todo o conforto e eficácia de uma almofada de ar sem o inconveniente de correr o risco de esvaziar, o que oferece tranquilidade ao utilizador e aos cuidadores. Tal como em todas as almofadas Vicair, as SmartCells, têm uma garantia vitalícia.



Estabilidade da pélvis

> Graças à imersão, a Vicair 4 absorve naturalmente assimetrias pélvicas, pelo que se adapta à morfologia de cada paciente. Apoia e estabiliza a pélvis, permitindo que a parte superior do corpo recupere o equilíbrio e melhore a mobilidade funcional. A imersão na almofada também limita o deslizamento e, por conseguinte, as forças de cisalhamento, tornando-a duplamente eficaz.

Fácil utilização e manutenção

> Está pronta a utilizar mal abre a embalagem. Perfeitamente simétrica, permite a utilização em qualquer orientação, não havendo hipótese de a posicionar incorretamente. Não necessita de ajuste e requer muito pouca manutenção. Pode ser lavada na máquina a 60°C, com as SmartCells no interior.



Fornecido com 2 capas (capa para incontinência opcional)



DESINFECÇÃO

A Vicair 4 é desinfetada quando lavada sem a capa a 60° na máquina.

Em suma...

- > Pronta a usar
- > Previne úlceras de pressão
- > Previne o deslizamento
- > Reduz as forças de cisalhamento
- > Reduz as forças de pressão
- > Regula eficazmente o microclima
- > Não necessita de ajustes.
- > Absorve naturalmente as assimetrias pélvicas
- > Confortável e fiável
- > Muito leve
- > Lavável na máquina a 60°C com as SmartCells

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	8 cm
Peso médio	800 g
Peso máximo do utilizador	250 kg

Nota: para melhorar a correção da postura, consulte a nossa gama de almofadas de posicionamento Vicair O2, uma vez que a Vicair 4 não é uma almofada regulável.

TAMANHOS DA ALMOFADA

Largura do assento (cm)	Tamanho da almofada VICAIR 4
36 > 42	40x40 cm
39 > 45	43x43 cm
41 > 47	45x45 cm
44 > 50	48x48 cm
46 > 53	50x50 cm

Vicair Hygiene

> Lavável na máquina

A parte superior fechada e a parte inferior aberta facilitam a lavagem na máquina.

> A abertura no centro

acompanha o contorno da sua cadeira de duche e sanita

> Redistribuição óptima da pressão

através dos 4 compartimentos individuais preenchidos com Vicair SmartCells

> Facilmente fixável

a um assento através da utilização das fitas em cada extremidade



Vicair Liberty & Liberty Profile

Ultra-leve, fácil de utilizar e confortável

Liberty

> Alívio da pressão

na superfície do assento

> Válvula auto-ajustável



> Separação entre os 2 compartimentos:
Trava suavemente o deslizamento frontal

Liberty Profile



> Base de espuma integrada

cria um ligeiro relevo promovendo maior imersão e reduzindo ainda mais o deslizamento frontal

> Recorte anterior:
melhora a posição do assento e a estabilidade

A almofada Hygiene da Vicair oferece a combinação perfeita de conforto e proteção da pele para pessoas com mobilidade reduzida.

A Vicair Hygiene é frequentemente utilizada com a nossa famosa gama Aquatec Ocean Ergo, mas também pode ser utilizada noutras cadeiras de banho ou de duche. A almofada Vicair é fixada com tiras de fixação em cada canto para garantir que se mantém no lugar.

- Combinação perfeita de conforto e proteção da pele no duche e na casa de banho
- Equipado com fitas de fixação ajustáveis individualmente para uma colocação óptima

PERFORMANCE DO PRODUTO

Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●○
Redistribuição da pressão	●●●○
Redução das forças de cisalhamento	●●●○
Controlo do microclima	●●●○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●○
Posicionamento	●●●○
Estabilidade lateral	●●●○
Estabilidade frontal	●●●○
Prevenção de deslizamento	●●●○
Ajustes manuais	●●●●
Facilidade de transferência	●●●○
Manutenção e segurança	●●●●
Durabilidade	●●●○
Fiabilidade	●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●
Nível de higiene	●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●○
Conforto	●●●○
Leveza	●●●●
Tamanhos disponíveis	●○○○
Peso máximo do utilizador	●●●●
Ajustes automáticos	●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	8 cm
Peso médio	600 g
Peso máximo do utilizador	250 kg
As SmartCells não têm garantia vitalícia	

TAMANHO DISPONÍVEL

Largura 48 cm x profundidade 45 cm

A almofada Liberty é uma almofada simples, confortável e pronta a utilizar, cheia de SmartCells e rodeada de fluido de silicone. Alivia a pressão e previne úlceras por pressão em utilizadores de risco baixo ou médio. A sua válvula auto-ajustável facilita a sua utilização. Molda-se perfeitamente ao contorno do corpo, proporcionando o máximo conforto e estabilidade ao utilizador.

- Previne úlceras por pressão
- Contribui para a redistribuição da pressão
- Estabilidade
- Confortável
- Muito leve
- Fácil de lavar

PERFORMANCE DO PRODUTO


Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●○
Redistribuição da pressão	●●●○
Redução das forças de cisalhamento	●●●○
Controlo do microclima	●●●○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●○
Posicionamento	●●●○
Estabilidade lateral	●●●○
Estabilidade frontal	●●●○
Prevenção de deslizamento	●●●○
Ajustes manuais	○●●●
Facilidade de transferência	●●●○
Manutenção e segurança	●●●○
Durabilidade	●●●○
Fiabilidade	●●●○
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●○
Nível de higiene	●●●○
Funcionalidade e aplicação	●●●○
Conforto	●●●○
Leveza	●●●○
Tamanhos disponíveis	●●●○
Peso máximo do utilizador	●●●○
Ajustes automáticos	●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	6 cm
Peso médio	900 g
Peso máximo do utilizador	150 kg
As SmartCells não têm garantia vitalícia	

TAMANHOS DA ALMOFADA

■ STANDARD
■ indisponível

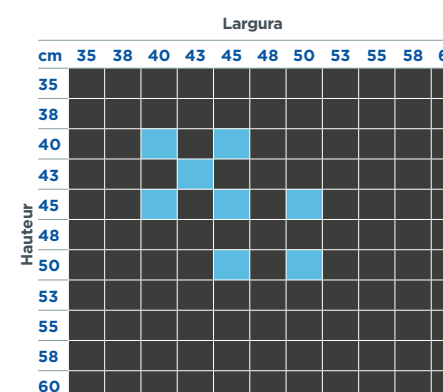

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

Vicair Liberty TC

Para conforto na casa de banho



A Vicair Liberty TC é uma almofada de assento de sanita que oferece conforto e proteção da pele durante as idas à casa de banho. É ideal para utilizar quando o controlo dos intestinos e da bexiga resulta numa rotina mais longa na casa de banho. A almofada é fácil de instalar: basta prender a almofada ao assento da sanita. Com dois tamanhos disponíveis, a Liberty TC pode ser instalada numa vasta gama de assentos sanitários. A largura da Liberty TC é facilmente ajustável e, claro, é fácil de limpar e desinfetar.

PERFORMANCE DO PRODUTO


Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●○○
Redistribuição da pressão	●●●○○
Redução das forças de cisalhamento	●●○○○
Controlo do microclima	●●○○○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●○○
Posicionamento	●●●○○
Estabilidade lateral	●●○○○
Estabilidade frontal	-
Prevenção de deslizamento	-
Ajustes manuais	-
Facilidade de transferência	●●●○○
Manutenção e segurança	●●●○○
Durabilidade	●●●○○
Fiabilidade	●●●○○
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●○○
Facilidade de Manutenção	●●●○○
Nível de higiene	●●●○○
Funcionalidade e aplicação	●●●○○
Conforto	●●●○○
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●○○
Peso máximo do utilizador	●●○○○
Ajustes automáticos	●●●○○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Altura	5 cm
Peso médio	350 g
Peso máximo do utilizador	150 kg
As SmartCells não têm garantia vitalícia	

TAMANHOS DA ALMOFADA

- STANDARD
- indisponível

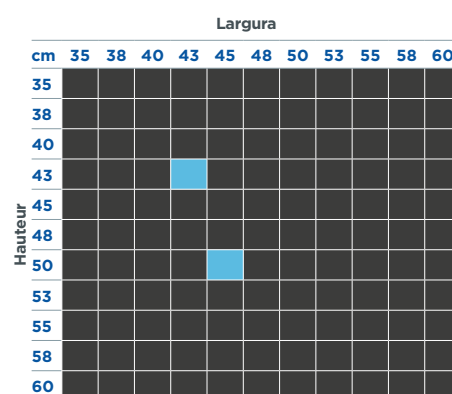

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.


Vicair Allrounder O2

Conviva, movimente-se e divirta-se! As suas atividades de lazer com total liberdade



A Allrounder O2 foi concebida para pessoas que podem ter de sair da sua cadeira de rodas, mas que querem manter uma boa proteção contra úlceras de pressão em todas as circunstâncias e superfícies.

A Allrounder O2 permite-lhe sentar-se e deslocar-se noutras superfícies com toda a segurança (piscina, caiaque, relvado, tapete, etc.). Foi concebida para uma utilização ocasional e pode ser um excelente acessório para os desportistas.

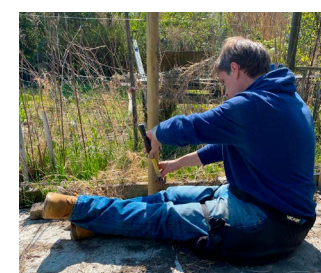


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso médio	800 g
Peso máximo do utilizador	100 kg
Lavável na máquina	60°C

TAMANHOS DISPONÍVEIS

S	< 38 cm
M	38 - 43 cm
L	43 - 48 cm

TIRE AS MEDIDAS CORRECTAS!
Não siga os contornos da perna, mantenha a fita métrica a direito. Meça de A a B (ou de B a A). Escolha o tamanho maior se a medida estiver entre dois tamanhos.

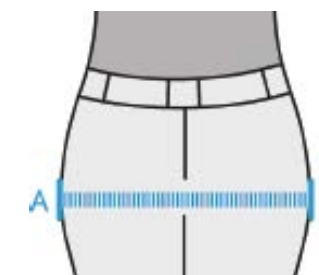

Vicair Liberty

Posicionamento simples para um conforto absoluto



> **Ilhéu de fixação:**
Para uma utilização segura

> **Tecnologia Vicair :**
SmartCells rodeadas por um fluido de silicone proporciona conforto, suporte e redistribuição da pressão



> **Fecho duplo à frente e atrás:**
Para facilitar a montagem de suportes de tronco, no tubo do encosto.

Vicair Anatomic


Um encosto modular para um posicionamento otimizado

> **Compartimentos Modulares :**
Para a redistribuição da pressão e um ótimo posicionamento



> **Compartimento central:**
Possibilidade de alívio da pressão da coluna vertebral

> **Ilhéu de fixação:**
Para uma utilização segura

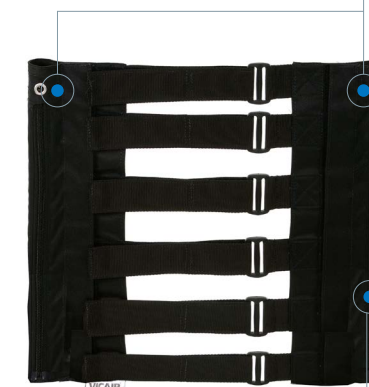

> **Fecho duplo à frente e atrás:**
Para facilitar a montagem de suportes de tronco, no tubo do encosto.

O encosto Vicair Liberty transforma o encosto da sua cadeira de rodas numa solução extremamente confortável.

Combinada com a regulação em tensão das faixas, o estofado oferece-lhe um perfeito alívio da dor, acompanha e apoia suavemente as anomalias posturais e/ou anatómicas. Este encosto extremamente leve é fácil de transportar, pois a cadeira de rodas pode ser encartada quando o encosto está montado. Uma solução fácil para oferecer conforto e suporte.

- Adapta-se perfeitamente à forma das suas costas.
- Leve e fácil de instalar.
- Melhora a estabilidade lateral.
- Fornecido com capa Comfair e faixas reguláveis em tensão.

PERFORMANCE DO PRODUTO

Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●○
Redistribuição da pressão	●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●○○
Controlo do microclima	●○○○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●○○
Posicionamento	●●○○
Estabilidade lateral	●○○○
Estabilidade frontal	●●○○
Prevenção de deslizamento	●●○○
Ajustes manuais	●○○○
Facilidade de transferência	●●○○
Manutenção e segurança	●●●○
Durabilidade	●●○○
Fiabilidade	●●●○
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●
Facilidade de Manutenção	●●●●
Nível de higiene	●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●○
Conforto	●●●○
Leveza	●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●○
Peso máximo do utilizador	●●●●
Ajustes automáticos	●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura	5 cm
Peso médio	350 g
Peso máximo do utilizador	150 kg
SmartCells não têm garantia vitalícia	

TAMANHOS DO ENCOSTO

	Largura*	Altura
LBS/1	36-40	45
LBS/2	40-43	45
LBS/3	44-48	45

*medida min-max entre os tubos do encosto da cadeira de rodas

■ STANDARD

O encosto Vicair Anatomic é uma solução de suporte extremamente confortável e adequada a todo o universo de utilizadores. Permite um excelente posicionamento e uma redistribuição da pressão de elevada eficácia.

Pronto a ser utilizado, pois ajusta-se dinamicamente ao contorno da coluna vertebral do utilizador, mas também permite uma grande variedade de ajustes individuais. Os ajustes podem ser efectuados com o utilizador ainda encostado. O estofado leve é utilizado em combinação com as faixas reguláveis em tensão, de fácil instalação que pode ser utilizada em cadeiras de rodas sem encosto rígido. É especialmente adequado para utilização em caso de deformações (extremas) da coluna vertebral.

- Compatível com cadeiras com encostos rígidos
- Possibilidade de descarga de zonas de risco.
- Fornecido com capa Air Exchange e faixas reguláveis em tensão.

PERFORMANCE DO PRODUTO

Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●○
Redistribuição da pressão	●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●○○
Controlo do microclima	●○○○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●○○
Posicionamento	●●○○
Estabilidade lateral	●○○○
Estabilidade frontal	●●○○
Prevenção de deslizamento	●●○○
Ajustes manuais	●●●●
Facilidade de transferência	●●○○
Manutenção e segurança	●●●○
Durabilidade	●●○○
Fiabilidade	●●●○
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●
Facilidade de Manutenção	●●●●
Nível de higiene	●●●●
Funcionalidade e aplicação	●●●○
Conforto	●●●○
Leveza	●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●○
Peso máximo do utilizador	●●●●
Ajustes automáticos	●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Espessura	7 cm
Peso médio	900 g
Peso máximo do utilizador	150 kg

TAMANHOS DO ENCOSTO

■ STANDARD

■ Sob Consulta

Altura	Largura				
	30	35	40	45	50
32	■	■	■	■	■
40	■	■	■	■	■
48	■	■	■	■	■
56	■	■	■	■	■

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

Vicair Multifunctional O2

Para ser montado num encosto rígido ou flexível, minimiza a lordose lombar, estabiliza o tronco no plano frontal e abre a cintura escapular.



> **Suporte nas omoplatas :**
maior conforto e melhor apoio para otimizar mobilidade funcional

> **Descarga da coluna vertebral :**
o apoio é principalmente nas laterais

> **Compartimentos laterais :**
Compartimentos de imersão para estabilização lateral

> **Compartimentos inferiores :**
desobstrução dos glúteos respeitando curva lombar natural. Regulável para acentuar ou aliviar o apoio lombar ou do sacro

Vicair Multifunctional O2 - Opções

2 novas opções estão agora disponíveis com o encosto Multifunctional O2

Faixas reguláveis em tensão

- > São utilizadas para fixar o encosto Multifunctional O2 a uma estrutura flexível.
- > O encosto pode ser fixado diretamente às faixas com velcro ou utilizar o Conector



REF.	Largura do assento (cm)	Altura do encosto (cm)
SB/O240	36-41	36-40
SB/O340	43-50	36-40
SB/O248	36-41	43-50
SB/O348	43-50	43-50
SB/O256	36-41	52-58
SB/O356	43-50	52-58

Os sistemas de faixas necessários para encostos com mais de 50 cm de largura e 60 cm de altura necessitam de orçamento especial.

O encosto Multifunctional O2 oferece-lhe um elevado conforto e um excelente apoio. Adapta-se às curvas naturais da coluna vertebral. Graças às numerosas possibilidades de regulação, pode ser utilizado em variadas situações.

- Modular graças aos diferentes compartimentos.
- Possibilidade de descarga em situação de risco ou de dor.
- Leve, fácil de instalar.
- Compatível com encostos rígidos
- Compatível com encostos em tensão utilizando acessórios

PERFORMANCE DO PRODUTO


Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●○
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●○
Controlo do microclima	●●●●○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●○
Estabilidade lateral	●●●●○
Estabilidade frontal	●●●●○
Prevenção de deslizamento	●●●●●
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●○
Manutenção e segurança	●●●●●
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●○
Nível de higiene	●●●●○
Funcionalidade e aplicação	●●●●○
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●●●
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso médio	975 g
Peso máximo do utilizador	150 kg

TAMANHOS DO ENCOSTO

- STANDARD
- Sob Consulta

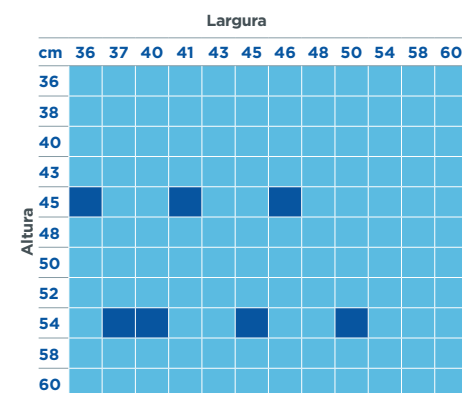

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

Conector

- > Apresenta-se sob a forma de uma cobertura e funciona como interface entre as faixas reguláveis em tensão e o encosto Multifunctional O2.

REF.	Largura do assento (cm)	Altura do encosto (cm)
BC/3645	36	45
BC/3754	37	54
BC/4054	40	54
BC/4145	41	45
BC/4554	45	54
BC/4645	46	45
BC/5054	50	54



Vicair Flex

Ideal para estruturas rígidas de encosto em cadeiras de rodas de conforto ou elétricas. Acomoda e suporta posturas cifóticas e o contorno lateral favorece a estabilidade no plano frontal.



AS PLACAS LATERAIS AJUDAM A ESTABILIZAR O TRONCO NO PLANO FRONTAL.

O encosto Vicair Flex oferece-lhe conforto e maior apoio, graças às suas placas laterais destacáveis e enchimento de SmartCells.

Pensado para montagem em cadeiras equipadas com estrutura rígida de encosto.

- Compatível com cadeiras com encostos rígidos.
- Modular graças a diferentes compartimentos
- Possibilidade de alívio de pressão em zonas de risco/dolorosas
- Leve, fácil de instalar
- Capa Air Exchange

PERFORMANCE DO PRODUTO

Proteção da pele / Prevenção úlceras por pressão	●●●●○
Redistribuição da pressão	●●●●●
Redução das forças de cisalhamento	●●●●○
Controlo do microclima	●●●○
Amortecimento de impactos e vibrações	●●●●●
Posicionamento	●●●●○
Estabilidade lateral	●●●●○
Estabilidade frontal	●●●●○
Prevenção de deslizamento	●●●●●
Ajustes manuais	●●●●●
Facilidade de transferência	●●●●○
Manutenção e segurança	●●●●●
Durabilidade	●●●●●
Fiabilidade	●●●●●
Funcionalidade em caso de utilização incorrecta	●●●●○
Facilidade de Manutenção	●●●●○
Nível de higiene	●●●●○
Funcionalidade e aplicação	●●●●○
Conforto	●●●●●
Leveza	●●●●●
Tamanhos disponíveis	●●●●●
Peso máximo do utilizador	●●●●●
Ajustes automáticos	●●●●○

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso médio	900 g
Peso máximo do utilizador	135 kg

TAMANHOS DO ENCOSTO

STANDARD	■
Sob Consulta	■

Altura	Largura				
	41	43	45	47	49
55	■	■	■	■	■
56	■	■	■	■	■
57	■	■	■	■	■
58	■	■	■	■	■
59	■	■	■	■	■
60	■	■	■	■	■

Não serão aceites devoluções ou trocas de tamanhos especiais.

Apoio de calcanhar

O protetor para evitar úlceras por pressão na região calcânea

Maxxcare®

> Proteção contra a fricção e as forças de cisalhamento.

Revestido no exterior com um tecido anti-fricção, o protetor de calcanhar reduz ao mínimo os efeitos da fricção e a distorção dos tecidos quando o doente se movimenta na cama.

> Alívio do calcanhar e do tornozelo

Grças aos seus 4 tubos de ar na parte de trás e nos lados, o apoio de calcanhar Maxxcare oferece uma excelente proteção também ao tornozelo.



> Leve e perfeitamente adaptado à anatomia do pé

Pesa menos de 0,1 kg e mantém-se perfeitamente na posição correta, graças aos seus 2 pontos de fixação

O protetor de calcanhar Maxxcare alivia a pressão sobre o calcanhar e o tornozelo.

Os seus 4 tubos de ar destacáveis oferecem uma boa proteção contra as forças de fricção e de cisalhamento.

Equipado com uma parte inferior antiderrapante, pode ser utilizado deitado, sentado ou em marcha.


Apoio de calcanhar Maxxcare foi concebido para garantir o máximo conforto aos pacientes que desejam prevenir ou tratar as úlceras por pressão na região calcânea.

Simple e prático de utilizar

O apoio do calcanhar está pronto a ser utilizado e não requer qualquer preparação, podendo ser colocado numa questão de segundos pelo cuidador ou pelo próprio utilizador.

TAMANHOS DISPONÍVEIS

S	< 38 cm
M	38 - 43 cm
L	> 43 cm

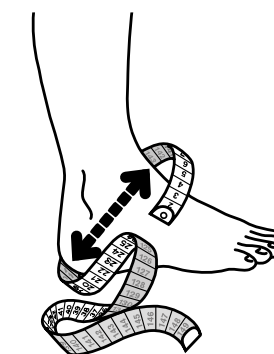

A zona antiderrapante sob o pé permite ao utilizador levantar-se sem o risco de escorregar

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

© 2024 Invacare International Sarl. Todos os direitos reservados. Todas as medidas mencionadas nesta tabela foram apuradas em condição de testes standards. As medidas podem variar até 2 cms. Fizemos os possíveis para que toda a informação desta tabela seja a correcta na altura da impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio- PT - 10/24



Yes, you can.®